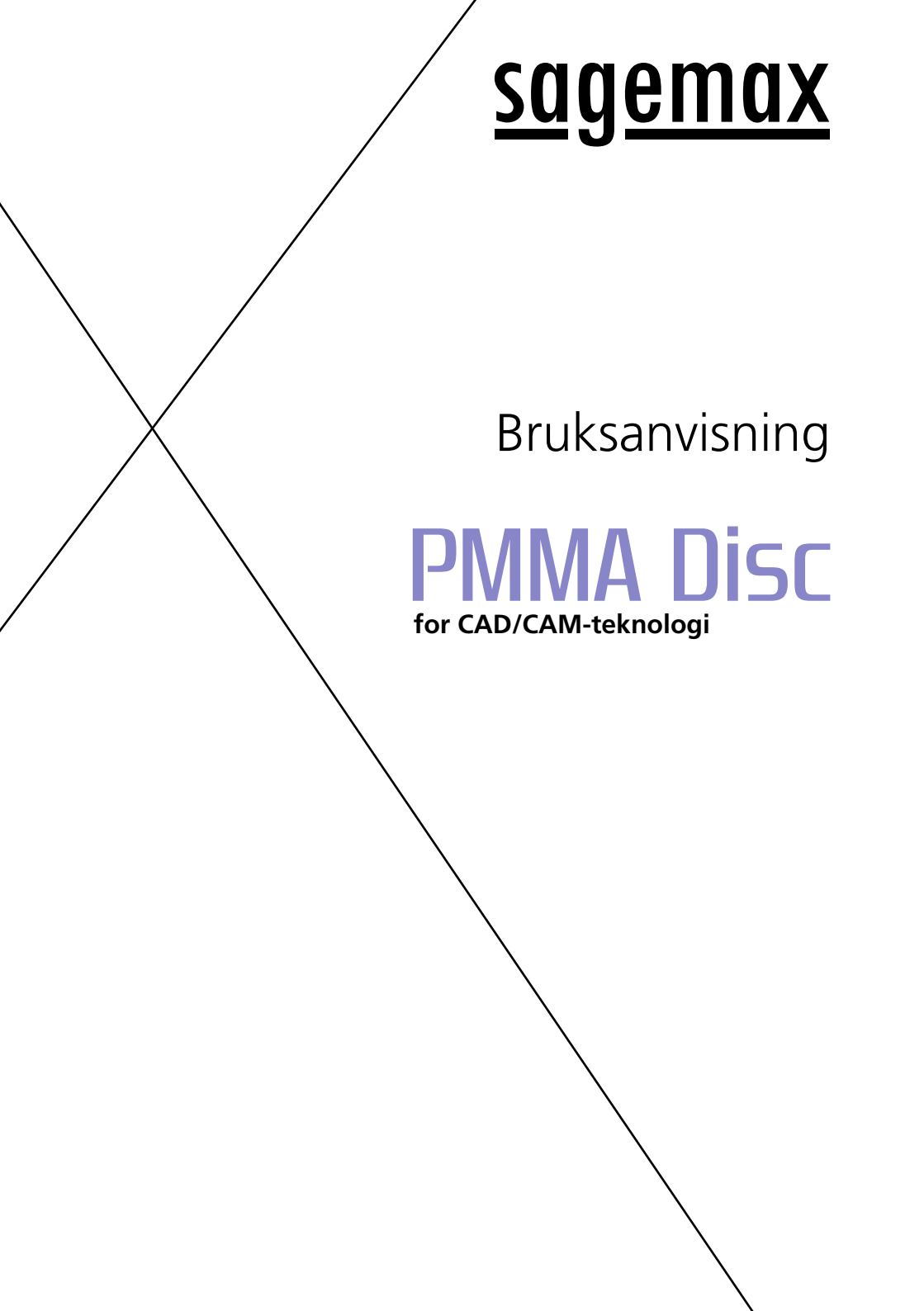


Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Bruksanvisning

PMMA Disc
for CAD/CAM-teknologi

Beskrivelse

Sagemax PMMA Disc egner seg for produksjon av provisoriske restaureringer ved bruk av CAD/CAM-teknologi.

Mekaniske egenskaper

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| – BøyeFASTHET | ≥50 MPa |
| – Vannabsorpsjon ihht. ISO 10477 | ≤40 µg /mm ³ |
| – Oppløselighet | ≤7,5 µg /mm ³ |

Sammensetning

- Polymetylmetakrylat (PMMA)
- Fargepigmenter

Indikasjoner

- Sagemax PMMA Disc er til bruk for CAD/CAM-produksjon av provisoriske tannerstatninger.
- Bruksområde: Kroner og broer i anterior- og posteriorområdet med opptil 2 mellomledd og en maksimal bæretid på 6 måneder.

Kontraindikasjoner

- Ved utilstrekkelig reduksjon av tannsubstans
- Når det er for lite tannsubstans tilgjengelig for å oppnå tilstrekkelig feste og optimal kraftfordeling
- Ved utilstrekkelig munnhygiene
- Ved utilstrekkelig tilgjengelig plass for bro-holdeelementer
- Ved påvist allergi eller sensibilitet mot komponenter i produktet
- Solid sementering

Retningslinjer for utforming

- Ved kroner må godstykkelsen være på minst 1 mm.
- Broer med ett mellomledd må inneholde et forbindelsestverrsnitt på minst 12 mm².
- Broer med opptil to sammenhengende mellomledd må inneholde et forbindelsestverrsnitt på minst 12 mm².

Bearbeiding

Bearbeiding av broen og separeringen av leddene utføres med krysstannede hardmetallfreser eller skjæreskiver som egner seg for plastmaterialer.

Polering

Forhåndspoler restaureringene med egnet silikonpoleringsutstyr og en liten geitehårbørste. Ordinære plastpoleringsmidler egner seg også for intraoral bruk. Unngå høy varmeutvikling. En omhyggelig polering er nødvendig for perfekte sluttresultater. Dette forhindrer plakkansamlinger og andre negative konsekvenser på fargen til restaureringen.

Rengjøring

Rengjør den ferdige restaureringen i omtrent 1 minutt i et ultralydbad. Bruk et alkalisk rengjøringsmiddelblanding på maksimalt 10%. Rengjøringstemperaturen må ikke overskride 40 °C. Ikke utfør damprengjøring, og unngå trykkbelastninger.

Tilpasning

Sammenlikn fargen til tannen med hjelp fra fargeprøven til den valgte restaureringsfargen etter prepareringen av tannen, for å bekrefte valget. Tilpass den provisoriske restaureringen med et provisorisk sementeringsselement. Fjern overskuddssement. Samtlige provisoriske sementmidler er egnet. Hvis det er planlagt en adhesiv sementering, må det brukes et eugenolfritt provisorisk sementmiddel. Se bruksanvisningen til den relevante produsenten.

Advarsler

Slipestøvet som oppstår ved bearbeiding av Sagemax PMMA Disc kan forårsake irritasjon hos hud, øyne og lufteier. Unnå innhalering av støvpartiklene. Pass alltid derfor på at sugeapparatet til fresemaskinen fungerer optimalt.

Merknader

Ved mistanke om sensibilitet, må materialet kun brukes etter en tilsvarende allergiscreening. Desinfiser freste komponenter før tilpasning i pasientens munn. Disse merknadene er basert på dagens kunnskap. Brukeren er ene og alene ansvarlig for at produktet brukes på korrekt måte. Produsenten kan ikke pålegges noen heftelser for utilfredsstillende resultater, da produsenten ikke har noen kontroll over bearbeidingsprosessen. Tannteknikeren må informere tannlegen om de nødvendige stegene som må utføres før tilpasning i pasientens munn. Tannteknikeren må sikre at tannlegen er informert om alle henvisningene bruksanvisningen.

Lagrings- og oppbevaringsinstrukser

- Hold materialet unna direkte sollys, og oppbevar tørt (-18 – 33°C).
- Ta hensyn til oppbevaringsinstruksene og utløpsdatoen på den utvendige forpakningen.
- Unngå sollys.
- Må ikke ende opp i hendene til barn.

sagemax



Produsert for:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118

Federal Way, WA 98003 USA

Phone: +1 253 214 0389

info@sagemax.com

www.sagemax.com

E C	R E P
-----	-------

Representant i EU:

AB Ardent

Generatorgatan 8

19560 Arlandastad, Sweden

Phone: +46 8594 412 57

info@sagemax.com

www.sagemax.com

CE 0123

RX only

**Bare til odontologisk
bruk**

Dato: 2019-06-13/Rev.0

NO

Produktet er utviklet til bruk på det odontologiske området og skal brukes i henhold til bruksanvisningen. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som oppstår på grunn av annen bruk eller ufagmessig bearbeiding. I tillegg er brukeren forpliktet til på forhånd og på eget ansvar å undersøke om produktet egner seg og kan brukes til de tiltenkte formål, særlig dersom disse formålene ikke er oppført i bruksanvisningen.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.