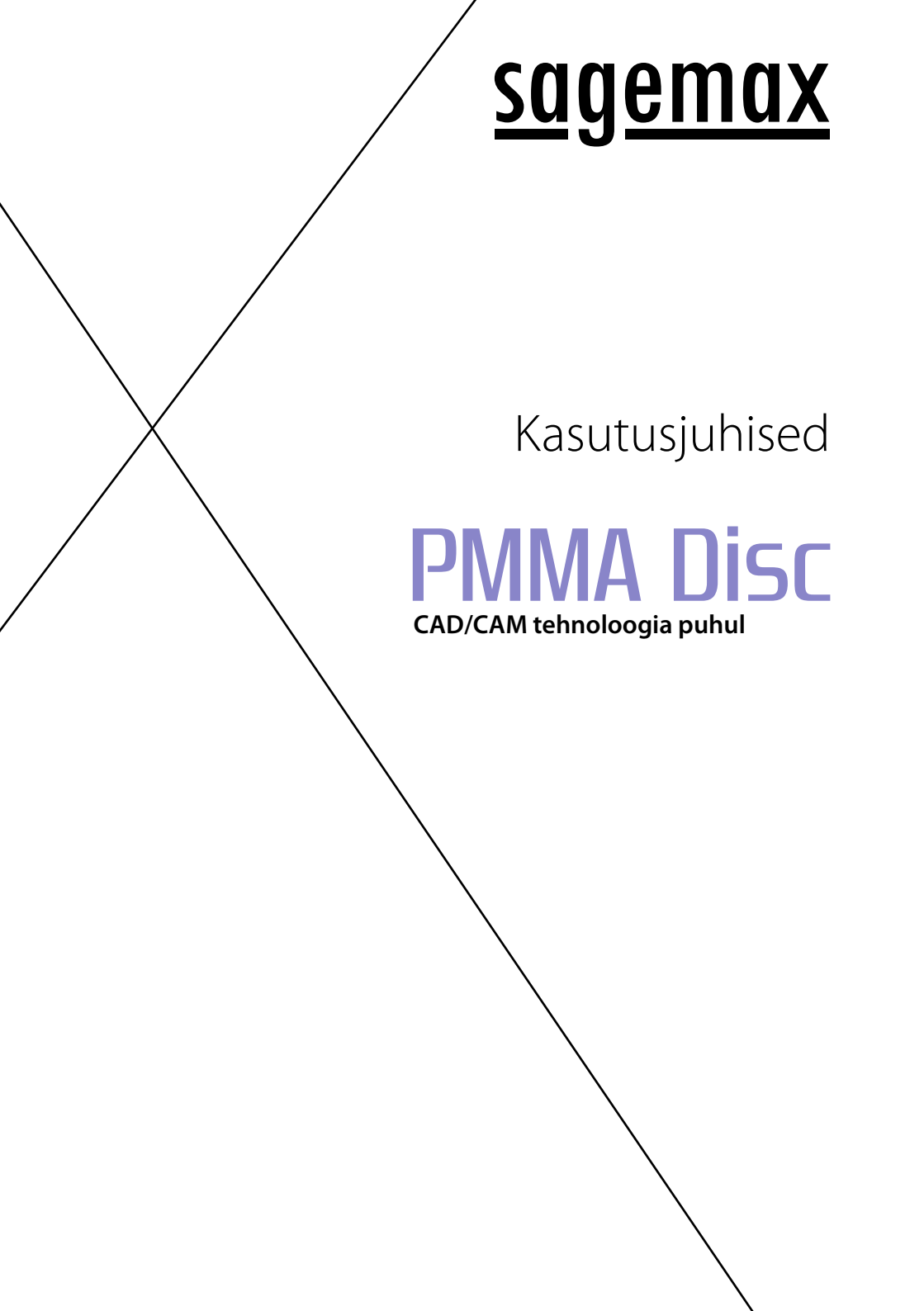


Two thin black diagonal lines intersecting on the left side of the page, extending from the top-left towards the bottom-right.

sagemax

Kasutusjuhised

PMMA Disc

CAD/CAM tehnoloogia puhul

Kirjeldus

Sagemax PMMA ketas on loodud ajutiste restauratsioonide valmistamiseks CAD/CAM tehnoloogia abil.

Mehaanilised omadused

- Paindetugevus ≥ 50 MPa
- Veeimavus vastavalt standardile ISO 10477 ≤ 40 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Lahustuvus $\leq 7,5$ $\mu\text{g}/\text{mm}^3$

Koostis

- Polümetüülmetakrülaad (PMMA)
- Värvipigmentid

Näidustused

- Sagemax PMMA ketas on loodud ajutiste hambaproteeside tootmiseks.
- Kliinilised rakendused on: Anterioorsed, posterioorsed sillad ja kroonid kuni 2 vahelüluga maksimaalselt 6-kuuse kasutusperioodiga.

Vastunäidustused

- Ebapiisav hambastruktuuri vähenemine.
- Ebapiisav hambastruktuur nõuetekohaseks haardumiseks ja jõu jaotumiseks.
- Ebapiisav suuhügieen.
- Ebapiisav vaheruum silla küllaldaste liigendite jaoks.
- Teadaolevad allergiad. Teadaolev sobimatus toote koostisega.
- Püsiv tsementimine.

Disaini parameetrid

- Kroonide puhul peab seina paksus olema üle 1 mm miinimumnõude.
- Ühe vahelüluga ühendatud sildade puhul ei tohi krooni ja vahelüli ühenduspinnal ristlõige jääda alla 12 mm².
- Vahemikus kuni kahe vahelüluga ühendatud sildade puhul ei tohi krooni ja vahelülide ühenduspinnal ristlõige jääda alla 12 mm².

Viimistlus

Karkasside viimistlemiseks ja eraldamiseks kasutage ristlõikelist volframkarbiidi või vaheketast, mis sobib akrüülidega.

Poleerimine

Restauratsioonide saab eel-poleerida sobiva silikoonist poleerimisvahendiga ning väikese kitse-harjastest harjaga. Standardsed akrüülid poleerimisvahendid on samuti sobilikud suusiseseks kasutamiseks. Vältige liigse kuumuse tekitamist. Ettevaatlik poleerimine on vältimatu parima tulemuse saavutamiseks hambakivi kogunemise ja teiste tooni negatiivselt mõjutavate tegurite vältimise jaoks.

Puhastamine

Asetage valmis restauratsioon ultraheliseadmesse vähemalt 1 minutiks. Leeliselise puhastuslahuse kontsentratsioon peaks olema maksimaalselt 10% ning maksimum temperatuur kuni 40°C. Vältige auru ja sururõhuga puhastamist.

Paigaldamine

Peale hamba ettevalmistamist, kasutage võrdlemiseks tooni kaarte ja määrake restauratsiooni lõplik toon. Paigaldage ajutine restauratsioon ajutise adhesiivse tsemendiga. Eemaldage üleliigne tsement. Kõik ajutised tsemendid / adhesiivsed materjalid on sobilikud. Kui restauratsiooni peab adhesiivselt tsementima, siis tuleb kasutada eugenoolivaba tsementimise materjali. Palun järgige vastava tsemendi tootjapoolseid kasutusjuhiseid.

Hoiatused

Ärge hingake Segamex PMMA ketta lihvimise tolmu sisse, see võib põhjustada silmade, naha ja hingamisteede ärritust.

Seetõttu veenduge alati, et teie freesi tõmmits toimib laitmatult.

Vihjed

Kui kahtlustate allergiat toote vastu, kasutage seda vaid peale vastavate allergia sõeltestide tegemist. Desinfitseerige freesitud osad enne nende paigutamist patsiendi suhu. Need kasutusjuhised põhinevad tooteteabe hetkeolukorral. Toote õige kasutamise eest vastutab täielikult kasutaja. Tootja ei vastuta ebarahuldavate tulemuste eest, kuna puudub kontroll toote töötlemise üle. Hambatehnik teavitab hambaarsti restauratsiooniga tehtavate protseduuride kohta enne, kui see paigutatakse patsiendi suhu, veendudes et kogu vajalik teave antud kasutusjuhistest on hambaarstile edastatud.

Hoiustamine

- Säilitage materjali päikese eest kaitstult kuivas kohas (temperatuuril –18 kuni 33°C).
- Tutvuge pakendil toodud hoiustamistingimuste ja aegumiskuupäevaga.
- Vältige otsest päikesevalgust.
- Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

sagemax



Toodetud ettevõttele:

Sagemax Bioceramics, Inc.

34210 9th Ave. S., Suite 118
Federal Way, WA 98003 USA
Phone: +1 253 214 0389
info@sagemax.com
www.sagemax.com

E	C	R	E	P
---	---	---	---	---

EÜ esindaja:

AB Ardent

Generatorgatan 8
19560 Arlandastad, Sweden
Phone: +46 8594 412 57
info@sagemax.com
www.sagemax.com

CE 0123

Rx only
Kasutamiseks ainult
hambaravis.

Kuupäev: 2019-06-13/Rev.0
ET

Materjal on mõeldud ainult hambaravis kasutamiseks. Toodet tuleb käsitseda rangelt toote kasutamishuendi järgi. Garantii ei kehti, kui kahjustus on tulenenud huendi või kasutusala eiramisest. Kui tooteid ei kasutata huendi järgi, vastutab nende sobivuse ja kasutamise eest kasutaja. Kirjeldus ja andmed ei tähenda mingit garantiid omadustele ega ole siduvad.

© 2019 Sagemax Bioceramics, Inc.